

Manuel simplifié du SaHoMa[®]-II – Pour un démarrage rapide ...

Veillez noter :

Le manuel simplifié ne remplace pas le mode d'emploi détaillé, dont la connaissance et le respect sont supposés.

Vous y trouverez, entre autres, des instructions supplémentaires ainsi que des informations sur le changement de programme, le chargement de l'unité de commande et le nettoyage.



1

2

3

4

5

1. Placez la bague d'étanchéité et le masque d'inhalation sur l'arête nasale du cheval et fixez la sangle de fixation en reliant les attaches rapides aux réceptacles du masque d'inhalation.

2a. Poussez l'unité de commande sur les rails de guidage jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

2b. Insertion d'une membrane filtrante et fixation du panier à filtre au masque d'inhalation.

3. Remplissez l'unité de nébulisation à mailles avec la solution d'inhalation. **Il est essentiel que vous suiviez les instructions du mode d'emploi !**

4a. Fixez l'unité de nébulisation en maille en connectant le câble à la sortie droite ou gauche de l'unité de commande.

4b. Poussez le couvercle le long des rails de guidage jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.

5a. Activez l'unité de commande en appuyant plus longtemps sur le bouton de mise en marche via l'ouverture latérale du couvercle.


5b. L'unité de commande s'éteint automatiquement après le processus de nébulisation.

SaHoMa®-II Quick Start Guide – For a quick start ...

Please note:

Our Quick Start Guide does not replace reading and observation of the detailed operating manual.

You will find there more details as well as information about changing the program, charging the control unit and cleaning.

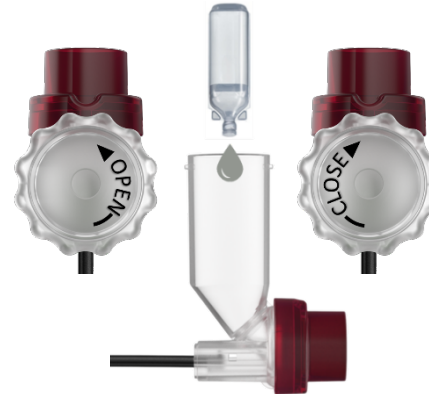

1

2

3

4

5

1a. Put the sealing ring and the inhalation mask over the horses muzzle and secure the fastening strap by plugging the two quick-release fasteners into the counterpart.

2a. Slide the control unit along the slide rails until it snaps in.

2b. Insert a filter membrane and slide the filter basket over the two bolts of the mask.

3a. Fill the prescribed substance into the mesh nebulization unit.
Please read the detailed operating manual!

4a. Connect the mesh nebulization unit by leading the connection cable to one of the two sockets of the control unit.

4b. Slide the protection cover along the side rails until it clicks into place.

5a. Turn on the control unit by holding down the power button through the opening in the protection cover.

5b. The control unit switches off automatically as soon as there is no residual quantity remaining.