




Gebrauchsanweisung

Operating Manual

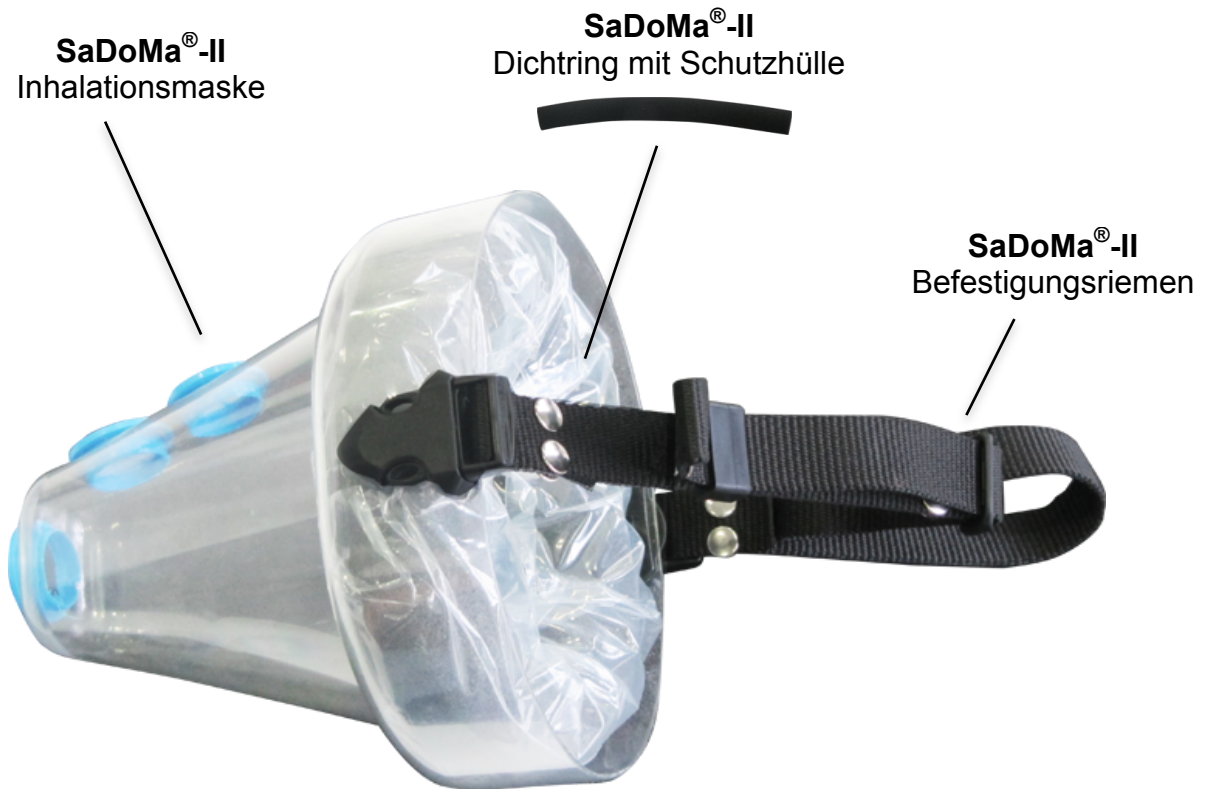

### Inbetriebnahme der SaDoMa<sup>®</sup>-II Inhalationsmaske

1. Entnahme der SaDoMa<sup>®</sup>-II Inhalationsmaske aus der Verpackung  
Entnehmen Sie die SaDoMa<sup>®</sup>-II Inhalationsmaske mit dem innenliegenden, separat eingepackten Befestigungsriemen aus der Verpackung. Entpacken Sie den Befestigungsriemen und verbinden ihn auf einer Seite mit der SaDoMa<sup>®</sup>-II Inhalationsmaske.
2. Aufsetzen der SaDoMa<sup>®</sup>-II Inhalationsmaske  
Schieben Sie die SaDoMa<sup>®</sup>-II Inhalationsmaske nun über die Schnauze Ihres Hundes und fixieren Sie die SaDoMa<sup>®</sup>-II Inhalationsmaske mithilfe des Befestigungsriemens am Kopf des Hundes.



3. Konnektion der SaDoMa®-II Inhalationsmaske mit dem M-neb® vet  
Nutzen Sie die SaDoMa®-II Inhalationsmaske zusammen mit dem M-neb® vet, so beachten Sie bitte die Gebrauchsanweisung des M-neb® vet.




#### Reinigung der SaDoMa®-II Inhalationsmaske

4. Reinigung der SaDoMa®-II Inhalationsmaske  
Die SaDoMa®-II Inhalationsmaske sollte nach jeder Inhalation mit lauwarmem Wasser gereinigt werden. Dazu entfernen Sie den Befestigungsriemen und den Dichtring mit der Schutzhülle. Die M-neb® vet Verneblereinheit muss vor der Reinigung ebenfalls von der SaDoMa®-II Inhalationsmaske entfernt werden.
5. Wechseln der Schutzhülle  
Die Schutzhülle dient zum Schutz des Dichtrings. Aus hygienischen Gründen ist der Wechsel der Schutzhülle je nach Grad der Verunreinigung nach ca. fünf Inhalationen vorzunehmen.



Gebrauchsanweisung der SaDoMa®-II

Artikel-Nr.:	Bild:	Bezeichnung:
DM-200		<p><b>SaDoMa®-II</b> Set bestehend aus Inhalationsmaske, Dichtring mit Schutzhülle und Befestigungsriemen</p>
DM-201		<p><b>SaDoMa®-II</b> Schutzhülle für Dichtring</p>
DM-202		<p><b>SaDoMa®-II</b> Befestigungsriemen</p>
DM-203		<p><b>SaDoMa®-II</b> Dichtring</p>

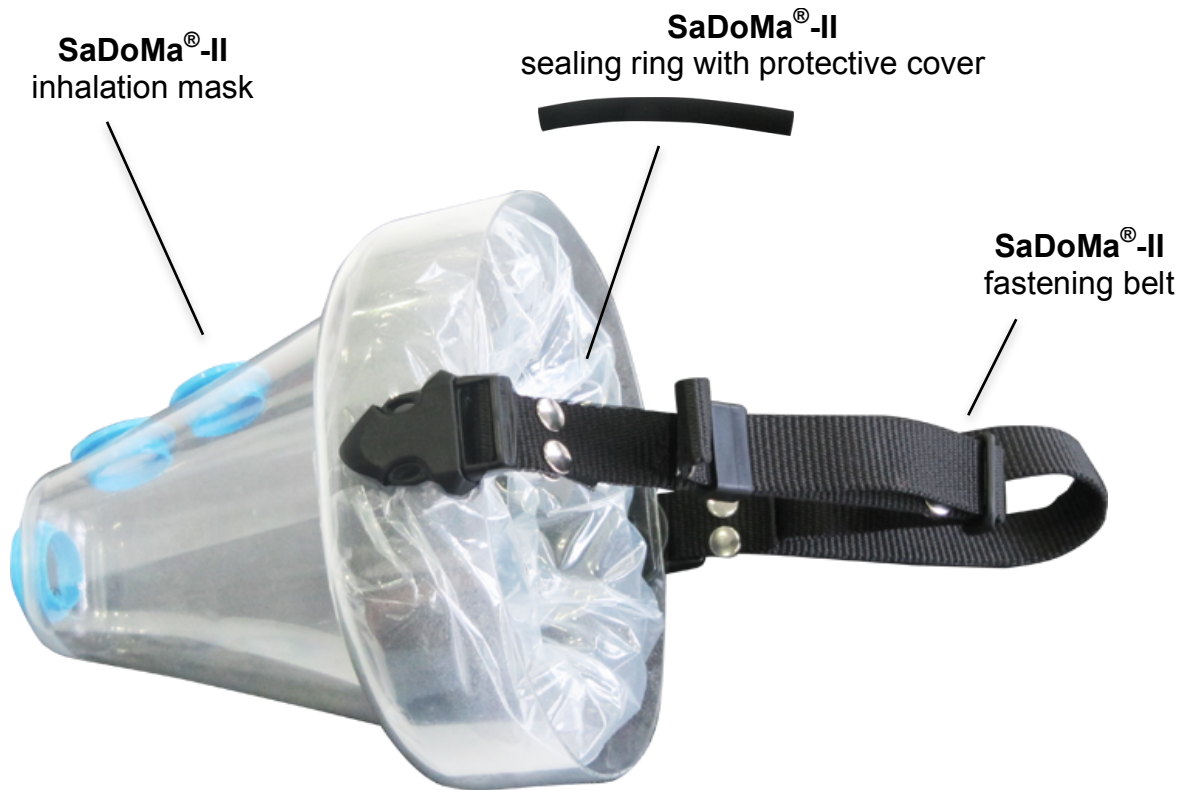

### How to operate the SaDoMa®-II inhalation mask

1. Removal of the SaDoMa®-II inhalation mask from its packaging  
Remove the SaDoMa®-II inhalation mask from its packaging together with the separately packed fastening belt inside. Unpack the fastening belt and connect it to the SaDoMa®-II inhalation mask.
2. How to attach the SaDoMa®-II inhalation mask  
Now put the SaDoMa®-II inhalation mask over the dog's snout and attach the SaDoMa®-II inhalation mask to the dog's head by means of the fastening belt.



3. Connection of the SaDoMa®-II inhalation mask with the M-neb® vet  
If you are using the SaDoMa®-II inhalation mask together with the M-neb® vet, please follow the operating manual of the M-neb® vet.







#### **Cleaning the SaDoMa®-II inhalation mask**

4. Cleaning the SaDoMa®-II inhalation mask  
The SaDoMa®-II inhalation mask should be cleaned after completion of every single inhalation by means of lukewarm water. For this purpose, please remove the fastening belt and sealing ring with protective cover. The M-neb® vet nebulization unit also needs to be removed from the inhalation mask before starting the cleaning process.
5. Replacement of the protective cover  
The protective cover serves as a protection of the sealing ring. For hygienic reasons, the protective cover should be replaced after approx. 5 inhalations depending on the degree of contamination.



Operating Manual of SaDoMa®-II

Article-No.:	Image:	Description:
DM-200		<p><b>SaDoMa®-II</b> set consisting of inhalation mask, sealing ring with protective cover and fastening belt</p>
DM-201		<p><b>SaDoMa®-II</b> protective cover for sealing ring</p>
DM-202		<p><b>SaDoMa®-II</b> fastening belt</p>
DM-203		<p><b>SaDoMa®-II</b> sealing ring</p>



**Nebu-Tec International**  
**med. Produkte Eike Kern GmbH**  
Kreuzfeldring 17  
63820 Elsenfeld - GERMANY

Tel.: +49 (0) 6022 – 610-62-0  
Fax: +49 (0) 6022 – 610-62-99

Email: [info@nebu-tec.de](mailto:info@nebu-tec.de)  
Web: [www.nebu-tec.de](http://www.nebu-tec.de)